




SHERAFINA®-RAPID

Proporciones de mezcla recomendadas - polvo de revestimiento : SHERALIQUID

Nuestras recomendaciones son valores orientativos y se basan en resultados de prueba de nuestro laboratorio. Varios factores locales como por ejemplo la temperatura ambiente, la humedad o ajustes de la batidora pueden influir los resultados. Por favor sigan las instrucciones de uso. Para cualquier tipo de pregunta técnica, nos es grato ayudarles.

Para una bolsita de revestimiento de 160 g se necesita en total 42 ml de líquido. En la siguiente tabla encuentra la mezcla del líquido (SHERALIQUID y agua destilada):

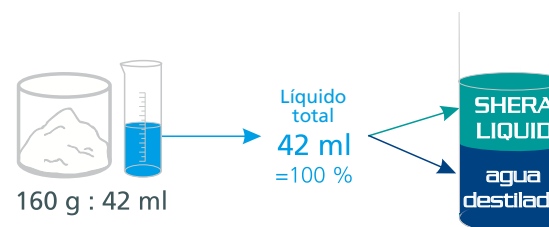

Aleaciones	Pilares con espiga & Inlay		Coronas de cera		Coronas telescópicas Modelado en resina		Coronas cónicas Modelado en resina	
	SHERA LIQUID	+ eau distillée	SHERA LIQUID	+ eau distillée	SHERA LIQUID	+ eau distillée	SHERA LIQUID	+ eau distillée
Aleación de alto contenido en oro 70 %- 80 % Au	18 ml 42 %	+ 24 ml 58 %	20 ml 47 %	+ 22 ml 53 %	25 ml 60 %	+ 17 ml 40 %	24 ml 58 %	+ 18 ml 42 %
Aleación, oro reducido 55 % - 65 % Au	18,5 ml 44 %	+ 23,5 ml 56 %	21 ml 50 %	+ 21 ml 50 %	28,5 ml 68 %	+ 13,5 ml 32 %	27 ml 65 %	+ 15 ml 35 %
Aleación basada en paladio	33,6 ml 80 %	+ 8,4 ml 20 %	28,5 ml 68 %	+ 13,5 ml 32 %	35 ml 84 %	+ 7 ml 16 %	33 ml 79 %	+ 9 ml 21 %
Aleación no preciosa	35,7 ml 85 %	+ 6,3 ml 15 %	38 ml 90 %	+ 4 ml 10 %	38 ml 90 %	+ 4 ml (10%) SHERA LIQUID-EXTRA		

o reducir la cantidad del líquido total a **38 ml = 100% SHERALIQUID**